

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/masazer-reczny-antycellulitowy-do-ciala-beautifuly-b-body-p-717.html>



## Masażer ręczny antycellulitowy do ciała BEAUTIFLY B- Body

Cena	<b>79,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>5903003700371</b>
Kod producenta	<b>5903003700371</b>
Kod EAN	<b>5903003700371</b>
Marka	<b>inna</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.7</b>
Rodzaj	<b>ciała</b>
Moc	<b>4.4</b>
EAN (GTIN)	<b>5903003700371</b>
Model	<b>B-Body</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>
Zasilanie	<b>USB</b>
Kolor	<b>różowy</b>
Kod producenta	<b>5903003700371</b>

### Opis produktu



**STAN TOWARU: UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM CO OZNACZA, ŻE PRODUKT MÓGŁ BYĆ UŻYWANY NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 DNI, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, 100% SPRAWNY, PRODUKT POSIADA ŚLADY W POSTACI RYS, W ZESTAWIE BRAKUJE KABLA, PRODUKT POSIADA INSTRUKCJE OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

---

**CENA KATOLOGOWA: 139 ZŁ**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.**

## Masażer ręczny antycellulitowy do ciała BEAUTIFLY B- Body

### DANE TECHNICZNE:

- **Przeznaczenie:** Do brzucha, Do karku, Do łydek, Do mięśni, Do nóg, Do piersi, Do pleców, Do ud
- **Ilość trybów masażu:** 3
- **Ilość nakładek w zestawie:** 1
- **Nakładki:** Z wypustkami
- **Konstrukcja:** Antypoślizgowy uchwyt, Kompaktowy, Łatwy w obsłudze, Lekka konstrukcja, Wodoodporny
- **Funkcje dodatkowe:** Fototerapia LED

### Jak działa B-Body?

1. Urządzenie posiada 3 programy:

-pierwszy na czerwonym świetle,

- drugi na zielone światło


-trzeci dla światła niebieskiego.


2. Urządzenia nie można włączyć podczas ładowania. Miganie wskaźnika zasilania oznacza, że trwa ładowanie. Gdy wskaźnik zasilania zaświeci się, ładowanie jest zakończone.

3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach pracy. Po ponownym włączeniu można używać go w sposób ciągły. Ciągłe miganie wskaźnika zasilania oznacza, że bateria jest bliska wyczerpania i należy ją naładować.

4. Urządzenie posiada funkcję pamięci. Po włączeniu urządzenie pozostaje w ostatnio używanym trybie.

5. Aktywacja poprzez długie naciśnięcie przełącznika przez 2 sekundy. Podczas pracy w trybie M można cyklicznie przełączać 3 tryby.

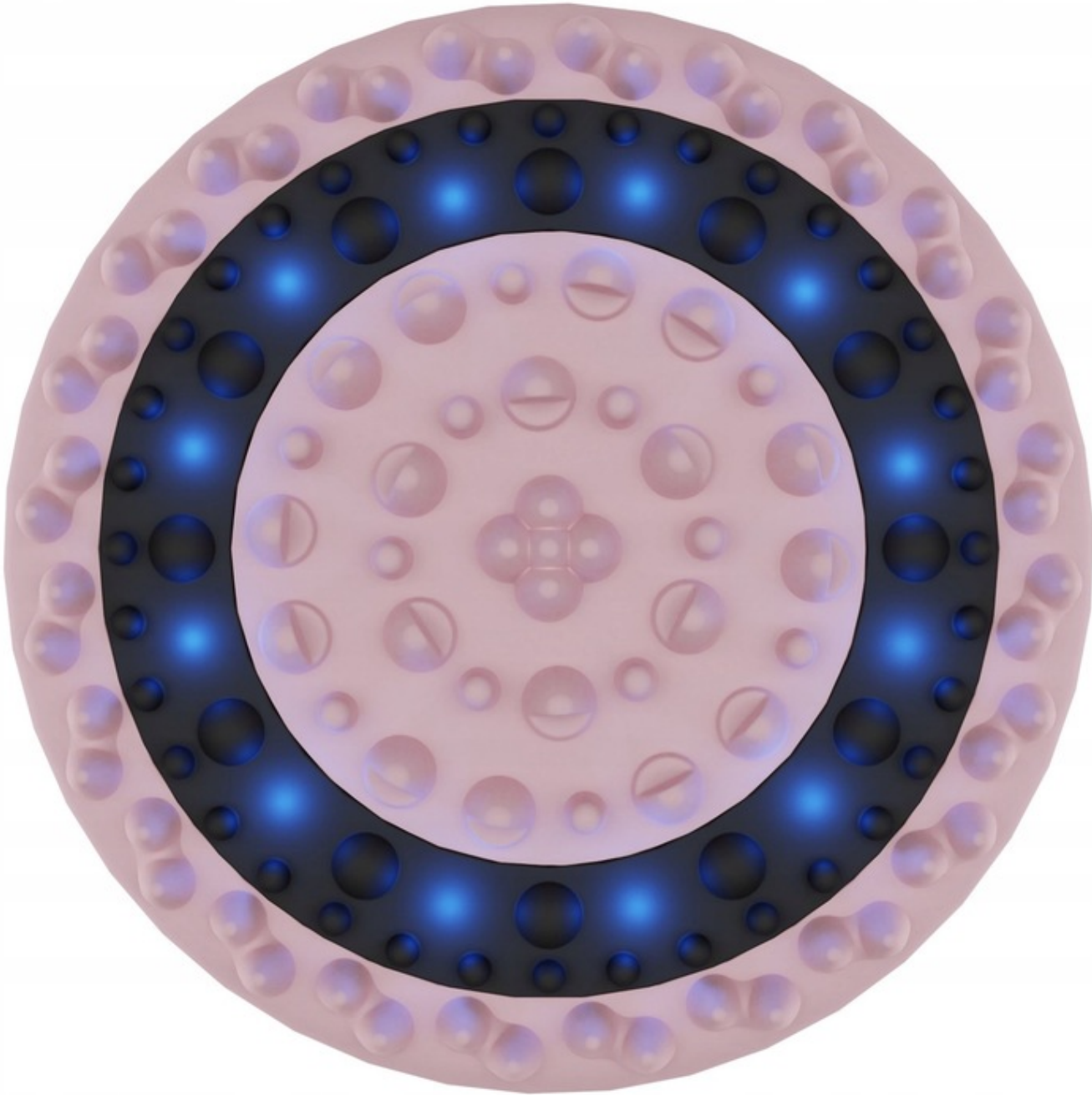

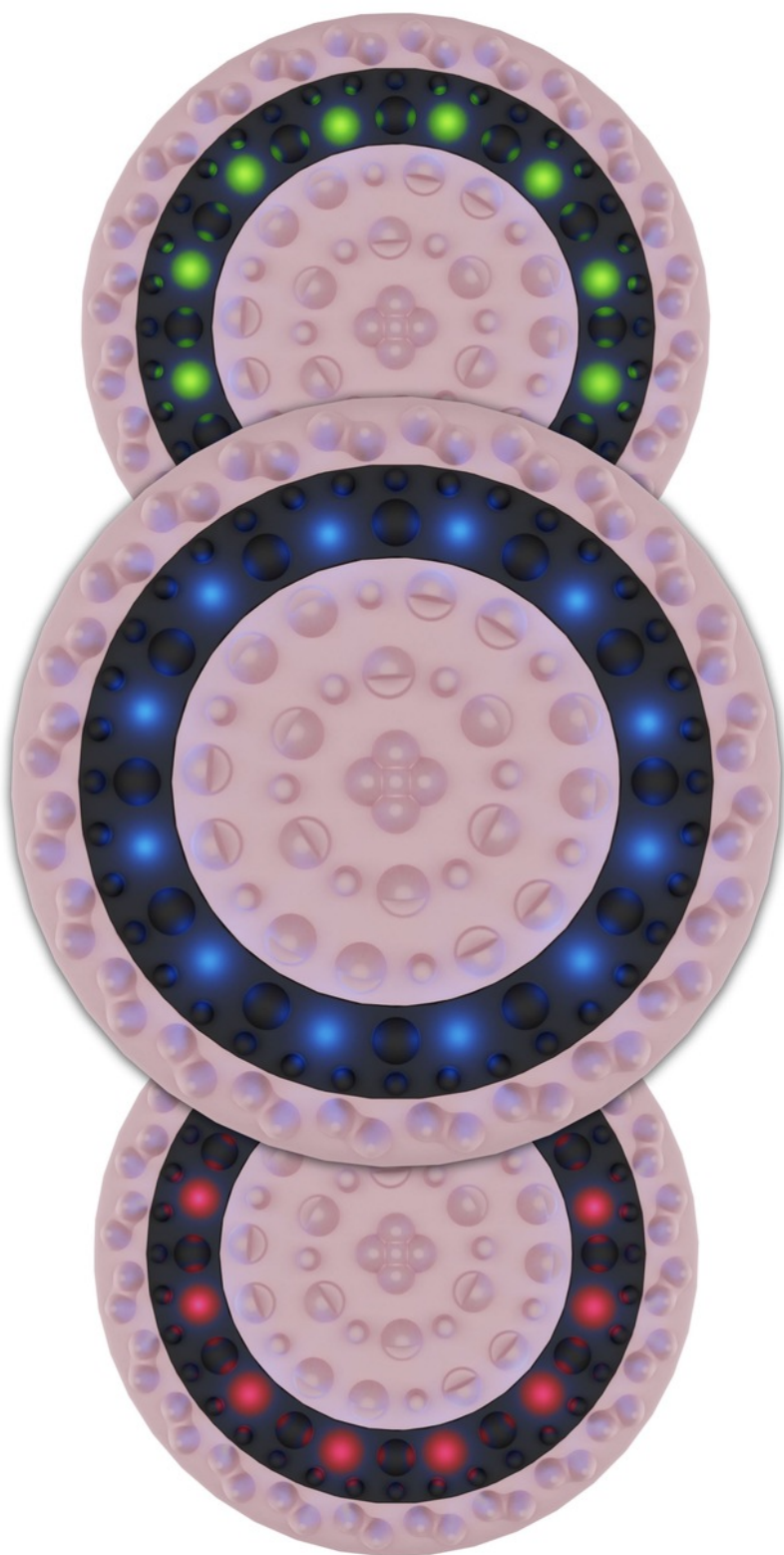

---

## Właściwości światła fotonowego

### **Czerwone światło**

Dociera do fibroblastów, które odpowiadają za syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Pobudza aktywność komórek, przyspiesza metabolizm, pobudza skórę do produkcji białek kolagenowych i opóźnia martwicę istniejącego kolagenu. Działa również detoksykująco i drenująco, zwiększa przepływ limfy.

### **Niebieskie światło**

Hamuje rozwój stanu zapalnego. Przyspiesza gojenie się ran, siniaków i stłuczeń. Stosuje się je w walce z rogowaceniem słonecznym.

### **Zielone światło**

Działa na poziomie naskórka. Wskazany w celu redukcji przebarwień i plam słonecznych. Penetruje podstawowe warstwy naskórka, stymuluje dopływ składników odżywczych, wspomaga regenerację dojrzałej skóry.















